

INTEGRA

PIPETBOY GENIUS 智能电动助吸器

更卓越的液体控制

PIPETBOY GENIUS智能电动助吸器，可兼容市面上主流的1-100 mL血清移液管。搭配专用的INTEGRA血清移液管时，可通过内置光学传感器读取管尾色标以识别规格，进一步开启重复分液与防满溢功能，让移液从“手动控制”迈向“智能控制”。

产品特点

重复分液，更高效：

搭配INTEGRA血清移液管，仅需一次吸液，通过按键操作，即可实现0.1-50 mL范围内任意体积的重复分液。告别反复读取刻度，轻松精准分液，显著提高实验效率。

防满溢保护，更安全：

搭配INTEGRA血清移液管，可自动防满溢，当吸入的液体略高于标称容积时将自动停止吸取。避免吸入过量液体风险，无需频繁更换滤芯。

更精确、更灵敏：

灵敏的压力控制速度，可实现逐滴分液，应用于高精度移液场景，精准移液直至最后一滴。

技术参数

重复分液量程范围	0.1 mL -50mL
重复分液准确度	重复分配移液管总量程10 %的体积时准确度为±2 %
重力分配	轻压分配按钮
移液管兼容性	量程1-100 mL的玻璃和塑料移液管
防护滤芯	0.45 μm（标配）或0.2 μm（另行单独订购）

最大移液速度	13.5mL/s
运行条件	5-40 °C，RH不超过80 %
运行时间	25 mL移液循环至少2000次（电池满电）
电源要求	100 – 240 VAC，50/60 Hz
电池	可更换，锂聚合物，1300 mAh

订购信息

目录号	1011	1012	1013	1014	1015	1016
颜色	 白色奇才	 柠檬亮点	 薄荷智者	 深红灵动	 蓝色光辉	 钢铁精英

每支PIPETBOY GENIUS电动助吸器标配锂聚合物电池、0.45 μm除菌级滤芯和壁挂支架。

不含电源适配器，需另行单独订购【电源适配器（100-240 VAC，50/60 Hz），货号：1203】



INTEGRA 血清移液管

解锁PIPETBOY GENIUS的智能移液

INTEGRA血清移液管，可兼容市面上主流的电动助吸器。但作为PIPETBOY GENIUS的首选搭档，依托专有管尾色标，让GENIUS智能识别移液管规格，解锁重复分液和防满溢两大独特功能，实现更高效、更安全、更精准的移液。

产品特点

量程范围广：

覆盖1-100 mL

防滴落设计：


25、50和100mL移液管的管嘴采用了特殊设计以降低移液管的滴液风险，特别是在移取大量液体的过程中

丝印刻度：

双向刻度便于读取；负刻度提供了额外的工作体积；标称量程准确度 $\pm 2\%$

特殊颜色标识：

PIPETBOY GENIUS的内置光学传感器可智能读取管尾色标，识别量程范围，实现重复分液和防满溢功能

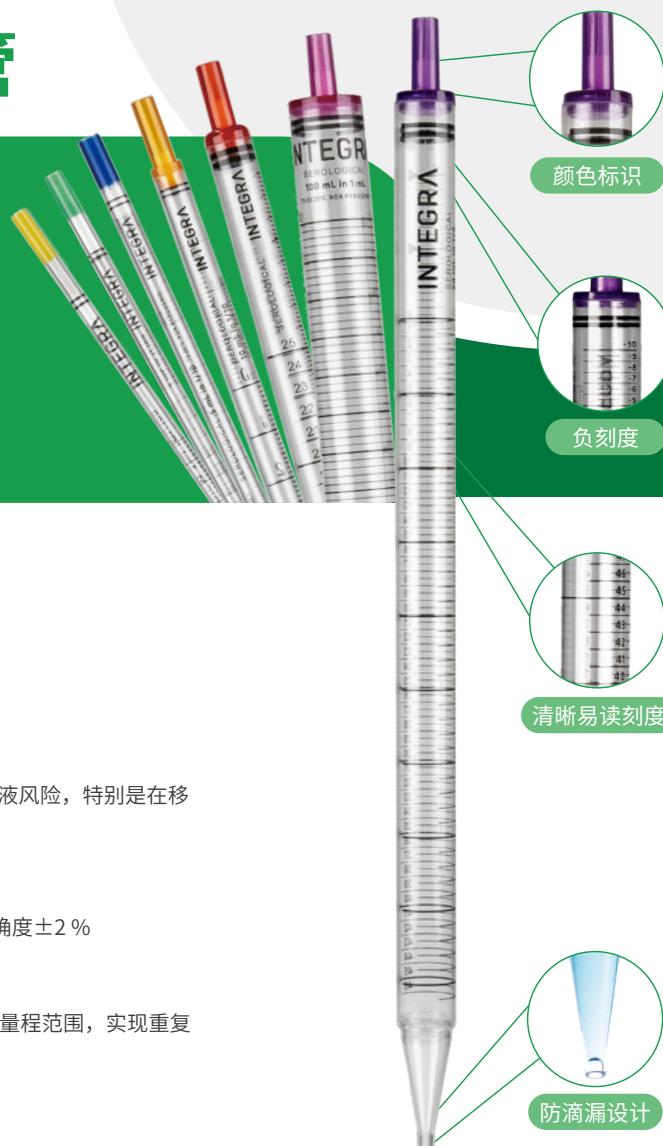

订购信息

INTEGRA移液管 (独立包装)

目录号	容量	色环	数量
1401	1 mL	■	1000支/箱
1402	2 mL	■	1000支/箱
1403	5 mL	■	200支/箱
1404	10 mL	■	200支/箱
1405	25 mL	■	200支/箱
1406	50 mL	■	100支/箱
1407	100 mL	■	100支/箱

INTEGRA移液管 (大包装)

目录号	容量	色环	数量
1501	1 mL	■	40袋×25支，共1000支/箱
1502	2 mL	■	40袋×25支，共1000支/箱
1503	5 mL	■	20袋×25支，共500支/箱
1504	10 mL	■	20袋×25支，共500支/箱
1505	25 mL	■	8袋×25支，共200支/箱
1506	50 mL	■	4袋×25支，共100支/箱
1507	100 mL	■	10袋×10支，共100支/箱



微信公众号



微信视频号



小红书号

广州洁特生物过滤股份有限公司
Guangzhou Jet Bio-Filtration Co., Ltd.

广州黄埔园区地址：广州市黄埔区永和经济技术开发区斗塘路1号
广州增城园区地址：广州市增城区宁西街道创业大道114号

电话：400-8717-688

官网：www.jetbiofil.com

邮箱：customer@jetbiofil.com