

大容量
新规格

培养基方瓶系列

为珍贵试剂, 构筑安全屏障

经济款
新品



洁特生物培养基方瓶, 采用高透明PETG或PET材质制成, 适用于生物制药、生物技术与科研实验室的液体处理需求, 为培养基、血清、缓冲液、中间体等关键液体的储存、转移与运输提供理想容器。

- 材质: 瓶身聚对苯二甲酸乙二酯共聚物(PETG)/聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET), 瓶盖高密度聚乙烯(HDPE), 均符合USP Class VI标准
- 规格(PETG款): 30mL 60mL 125mL 250mL 500mL 1000mL 2000mL 5000mL
- 规格(PET款): 500mL

产品特性

USP Class VI级原材


- 优选医用级原材, 成分明确、不含动物源

耐摔抗破裂

- 壁厚均匀, 具有卓越的抗破裂与耐冲击特性
- 通过ISTA 2A标准的模拟跌落运输测试验证, 无破裂、无变形

密封防漏

- 精密设计的密封防漏结构, 瓶盖和瓶身严密贴合
- 经-90kPa条件下严格的密封性测试, 无泄漏、无变形

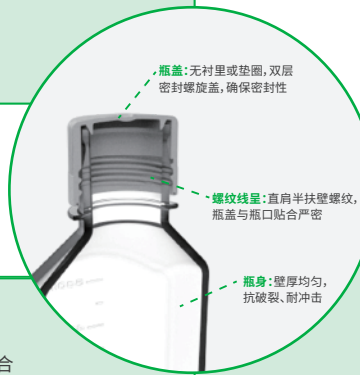

瓶盖: 无衬里或垫圈, 双层密封螺旋盖, 确保密封性

螺纹线量: 直肩半扶壁螺纹, 瓶盖与瓶口贴合严密

瓶身: 壁厚均匀, 抗破裂、耐冲击

化学性能稳定

- 耐化学性能好, 有效阻隔CO₂和O₂, 维持pH稳定
- 耐温范围为-80°C ~ 60°C, 可用于-80°C超低温冷冻保存

极低的可提取物和高生物安全性

- 经第三方权威检测认证, 具有极低的可提取物水平及高生物安全性
- 可提供全套验证报告, 支持审计与合规需求

- 瓶身透明度高, 整体通透光洁; 模刻刻度清晰、准确, 便于观察¹
- 瓶颈处有收缩环, 可固定收缩膜²
- 瓶底带洁特Logo, 底部内凹弧边设计, 放置稳定³
- 辐照灭菌, SAL 10⁻⁶
- 无DNase/RNase, 无热原、无内毒素、无细胞毒性
- 采用收缩膜托盘大包装或独立包装, 确保高洁净度



品质保证

生产企业认证		质量标准		第三方权威检测认证		
资质证书	ISO 9001、ISO13485、ISO15378	工艺验证	生产设备、模具验证	生物相容性测试	USP<151> 热原试验(PET)	
	FDA		生产工艺验证		USP<88> 皮内反应试验	
10万级GMP 洁净生产车间	ISO 8级要求	成品性能验证	密封性测试		ASTM F756-17 溶血试验	
	GB 50073-2013		冷冻测试		USP<88> 急性全身毒性试验	
	YY/T0033-2000		模拟运输跌落测试		USP<87>细胞毒性试验(PET)	
无菌检测实验室	CNAS认证		内毒素检测		可提取物研究 (USP<665>、 USP<1665>、BPOG)	GB/T 16886.10-2017 皮肤致敏试验(PET)
	ISO 7级要求		核酸酶检测			USP<88>皮下植入试验
	GB 50591-2013		产品无菌检测			元素杂质检测
	GB/T 16294-2010		细胞毒性检测			挥发性有机物检测
纯化水系统验证	GMP规定		不溶性微粒检测			半挥发性有机物检测
原材料	USP Class VI(PETG)			不挥发性有机物检测		
	理化测试			特殊有机化合物检测		
	TSE/BSE Free					

订购信息

PETG培养基方瓶

目录号	容量 (mL)	盖类型	灭菌	瓶颈内径 (mm)	外径 (mm)	带盖高度 (mm)	包装	个/托盘	个/箱
SSB010030	30	密封盖	是	17.6	38.2方形	62.5	塑料托盘+双层包装袋	24	96
SSB010060	60	密封盖	是	21.6	40.4方形	82.5	塑料托盘+双层包装袋	24	96
SSB010125	125	密封盖	是	34.2	53方形	106.5	塑料托盘+双层包装袋	24	96
SSB010250	250	密封盖	是	34.2	59.2方形	144	塑料托盘+双层包装袋	24	96
SSB130500	500	密封盖	是	34.2	73.6方形	178.5	塑料托盘+双层包装袋	24	48
SSB010000	1000	密封盖	是	34.2	92方形	217	塑料托盘+双层包装袋	24	24
SSB010002	2000	密封盖	是	47.2	115.5方形	270	塑料托盘+双层包装袋	6	12
SSB130002	2000	密封盖	是	47.2	115.5方形	270	独立袋装	1	12
SSB130005	5000	密封盖	是	41.6	166.5方形	298.7	独立袋装	1	6

PET培养基方瓶

目录号	容量 (mL)	盖类型	灭菌	瓶颈内径 (mm)	外径 (mm)	带盖高度 (mm)	包装	个/托盘	个/箱
SSB430500	500	密封盖	是	28.5	76.5方形	175.2	塑料托盘+双层包装袋	24	48
SSB530500	500	密封盖	是	28.5	76.5方形	175.2	独立袋装	1	24

保质期:产品在未开封状态下,储存于阴凉干燥处(15-30°C),有效期3年



微信公众号



微信视频号



小红书号

广州洁特生物过滤股份有限公司
Guangzhou Jet Bio-Filtration Co., Ltd.
地址:广州市黄埔区永和经济技术开发区斗塘路1号

电话:400-8717-688
官网:www.jetbiofil.com
邮箱:customer@jetbiofil.com