

# 培养基方瓶密闭系统

轻松实现液体无菌、安全转移!

在生物制品的工业生产中,降低配液、补液、取样等过程潜在的污染风险至关重要,培养基方瓶搭配无菌转移盖及管路系统,即可避免开放式操作带来的污染问题。



洁特生物推出的培养基方瓶密闭转移系统,瓶体采用符合USP Class VI标准的原料制成,优选进口管路配件,在10万级洁净车间生产,成品具有极低的可提取物水平与高生物安全性,可用于细胞治疗、基因治疗、抗体和疫苗等生物药的研发生产,可实现全封闭式无菌液体转移,最大程度降低污染风险!

匹配方瓶规格:250mL 500mL 1000mL 2000mL 5000mL

管路接头类型:Male MPC接头 FLL接头 热封管口

管路类型:两通 三通

材质:瓶身环己二醇(共聚聚酯)(PETG),瓶盖高密度聚乙烯(HDPE),内管聚四氟乙烯(PTFE)/硅胶,外管热塑性弹性体(TPE),FLL接头聚丙烯(PP)/Male MPC接头聚碳酸酯(PC),过滤器外壳聚丙烯(PP),过滤器滤膜聚四氟乙烯(PTFE),均符合USP Class VI标准

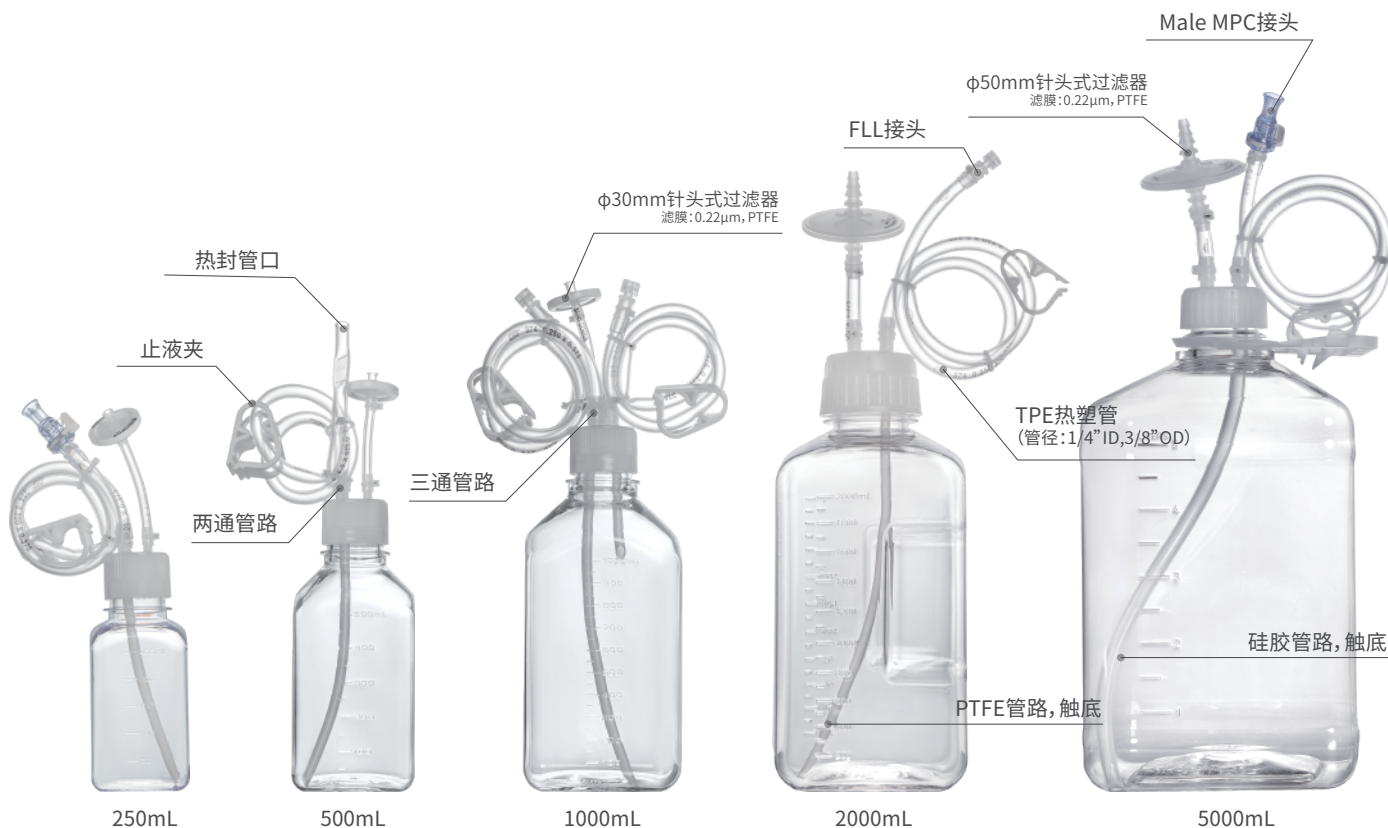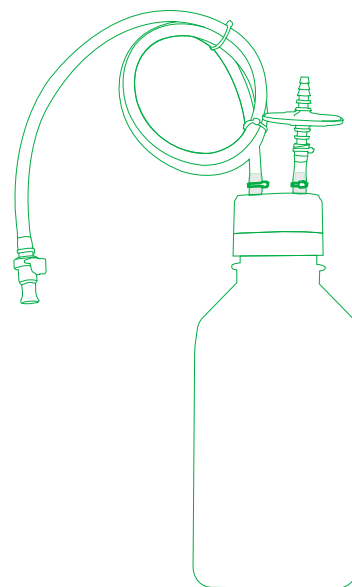

微信公众号



微信视频号



小红书号


广州洁特生物过滤股份有限公司  
Guangzhou Jet Bio-Filtration Co., Ltd.  
地址:广州市黄埔区永和经济技术开发区斗塘路1号

电话:400-8717-688  
官网:www.jetbiofil.com  
邮箱:customer@jetbiofil.com

## 产品特点:

- ◆ 瓶体采用符合USP Class VI标准的原料制成, 优选进口管路配件, 成品具有极低的可提取物水平与高生物安全性
- ◆ 瓶盖采用注塑一体式连接, 进/出液管配有止液夹, 可降低泄露、残留的风险
- ◆ 内侧管路可伸至瓶底, 液体转移无残留
- ◆ 0.22μm PTFE除菌空气过滤器, 液体转移时可平衡瓶内外压差, 同时保证瓶内无菌
- ◆ 多种管路类型和接头可选, 满足不同类型管道连接需求
- ◆ 使用温度范围: -80~60°C
- ◆ 辐照灭菌, SAL 10<sup>-6</sup>, 无DNase/RNase, 无内毒素、无细胞毒性

## 定制服务: 密闭系统均提供定制服务

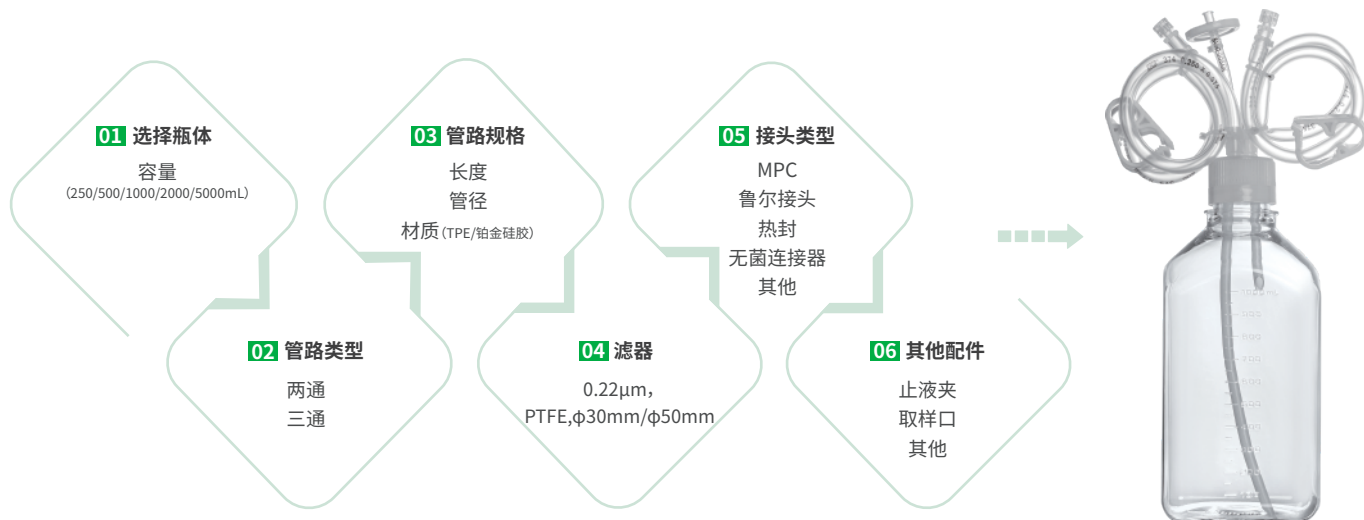

## 订购信息:

目录号	产品名称	管路规格			滤器	灭菌	个/袋	个/箱
		管路类型	管路尺寸	管路接口				
CSB010250	250mL方瓶密闭系统	两通	60cm, 1/4" ID, 3/8" OD	FLL	0.22μm, PTFE, φ30mm	是	1	10
CSB011250	250mL方瓶密闭系统	两通	60cm, 1/4" ID, 3/8" OD	热封	0.22μm, PTFE, φ30mm	是	1	10
CSB012250	250mL方瓶密闭系统	两通	60cm, 1/4" ID, 3/8" OD	Male MPC	0.22μm, PTFE, φ30mm	是	1	10
CSB211250	250mL方瓶密闭系统	两通	60cm, 1/8" ID, 1/4" OD	热封	0.22μm, PTFE, φ30mm	是	1	10
CSB311250	250mL方瓶密闭系统	两通	60cm, 1/4" ID, 7/16" OD	热封	0.22μm, PTFE, φ30mm	是	1	10
CSB020250	250mL方瓶无菌转移盖	两通	60cm, 1/4" ID, 3/8" OD	FLL	0.22μm, PTFE, φ30mm	是	1	10



微信公众号



微信视频号



小红书号

广州洁特生物过滤股份有限公司  
Guangzhou Jet Bio-Filtration Co., Ltd.  
地址: 广州市黄埔区永和经济技术开发区斗塘路1号

电话: 400-8717-688  
官网: www.jetbiofil.com  
邮箱: customer@jetbiofil.com

目录号	产品名称	管路规格			滤器	灭菌	个/袋	个/箱
		管路类型	管路尺寸	管路接口				
CSB021250	250mL方瓶无菌转移盖	两通	60cm, 1/4" ID, 3/8" OD	热封	0.22μm, PTFE, φ30mm	是	1	10
CSB022250	250mL方瓶无菌转移盖	两通	60cm, 1/4" ID, 3/8" OD	Male MPC	0.22μm, PTFE, φ30mm	是	1	10
CSB110250	250mL方瓶密闭系统	三通	60cm, 1/4" ID, 3/8" OD	FLL	0.22μm, PTFE, φ30mm	是	1	10
CSB111250	250mL方瓶密闭系统	三通	60cm, 1/4" ID, 3/8" OD	热封	0.22μm, PTFE, φ30mm	是	1	10
CSB120250	250mL方瓶无菌转移盖	三通	60cm, 1/4" ID, 3/8" OD	FLL	0.22μm, PTFE, φ30mm	是	1	10
CSB121250	250mL方瓶无菌转移盖	三通	60cm, 1/4" ID, 3/8" OD	热封	0.22μm, PTFE, φ30mm	是	1	10
CSB010500	500mL方瓶密闭系统	两通	60cm, 1/4" ID, 3/8" OD	FLL	0.22μm, PTFE, φ30mm	是	1	10
CSB011500	500mL方瓶密闭系统	两通	60cm, 1/4" ID, 3/8" OD	热封	0.22μm, PTFE, φ30mm	是	1	10
CSB012500	500mL方瓶密闭系统	两通	60cm, 1/4" ID, 3/8" OD	Male MPC	0.22μm, PTFE, φ30mm	是	1	10
CSB211500	500mL方瓶密闭系统	两通	60cm, 1/8" ID, 1/4" OD	热封	0.22μm, PTFE, φ30mm	是	1	10
CSB013500	500mL方瓶密闭系统	两通	60cm, 1/4" ID, 7/16" OD	热封	0.22μm, PTFE, φ30mm	是	1	10
CSB020500	500mL方瓶无菌转移盖	两通	60cm, 1/4" ID, 3/8" OD	FLL	0.22μm, PTFE, φ30mm	是	1	10
CSB021500	500mL方瓶无菌转移盖	两通	60cm, 1/4" ID, 3/8" OD	热封	0.22μm, PTFE, φ30mm	是	1	10
CSB022500	500mL方瓶无菌转移盖	两通	60cm, 1/4" ID, 3/8" OD	Male MPC	0.22μm, PTFE, φ30mm	是	1	10
CSB110500	500mL方瓶密闭系统	三通	60cm, 1/4" ID, 3/8" OD	FLL	0.22μm, PTFE, φ30mm	是	1	10
CSB111500	500mL方瓶密闭系统	三通	60cm, 1/4" ID, 3/8" OD	热封	0.22μm, PTFE, φ30mm	是	1	10
CSB120500	500mL方瓶无菌转移盖	三通	60cm, 1/4" ID, 3/8" OD	FLL	0.22μm, PTFE, φ30mm	是	1	10
CSB121500	500mL方瓶无菌转移盖	三通	60cm, 1/4" ID, 3/8" OD	热封	0.22μm, PTFE, φ30mm	是	1	10
CSB010001	1000mL方瓶密闭系统	两通	60cm, 1/4" ID, 3/8" OD	FLL	0.22μm, PTFE, φ30mm	是	1	10
CSB011001	1000mL方瓶密闭系统	两通	60cm, 1/4" ID, 3/8" OD	热封	0.22μm, PTFE, φ30mm	是	1	10
CSB012001	1000mL方瓶密闭系统	两通	60cm, 1/4" ID, 3/8" OD	Male MPC	0.22μm, PTFE, φ30mm	是	1	10
CSB211001	1000mL方瓶密闭系统	两通	60cm, 1/8" ID, 1/4" OD	热封	0.22μm, PTFE, φ30mm	是	1	10
CSB311001	1000mL方瓶密闭系统	两通	60cm, 1/8" ID, 1/4" OD	FLL	0.22μm, PTFE, φ30mm	是	1	10
CSB511001	1000mL方瓶密闭系统	两通	60cm, 1/4" ID, 7/16" OD	热封	0.22μm, PTFE, φ30mm	是	1	10
CSB020001	1000mL方瓶无菌转移盖	两通	60cm, 1/4" ID, 3/8" OD	FLL	0.22μm, PTFE, φ30mm	是	1	10
CSB021001	1000mL方瓶无菌转移盖	两通	60cm, 1/4" ID, 3/8" OD	热封	0.22μm, PTFE, φ30mm	是	1	10
CSB022001	1000mL方瓶无菌转移盖	两通	60cm, 1/4" ID, 3/8" OD	Male MPC	0.22μm, PTFE, φ30mm	是	1	10



CSB110001	1000mL方瓶密闭系统	三通	60cm, 1/4" ID, 3/8" OD	FLL	0.22μm, PTFE, φ30mm	是	1	10
CSB111001	1000mL方瓶密闭系统	三通	60cm, 1/4" ID, 3/8" OD	热封	0.22μm, PTFE, φ30mm	是	1	10
CSB120001	1000mL方瓶无菌转移盖	三通	60cm, 1/4" ID, 3/8" OD	FLL	0.22μm, PTFE, φ30mm	是	1	10
CSB121001	1000mL方瓶无菌转移盖	三通	60cm, 1/4" ID, 3/8" OD	热封	0.22μm, PTFE, φ30mm	是	1	10
CSB010002	2L方瓶密闭系统	两通	60cm, 1/4" ID, 3/8" OD	FLL	0.22μm, PTFE, φ50mm	是	1	6
CSB011002	2L方瓶密闭系统	两通	60cm, 1/4" ID, 3/8" OD	热封	0.22μm, PTFE, φ50mm	是	1	6
CSB012002	2L方瓶密闭系统	两通	60cm, 1/4" ID, 3/8" OD	Male MPC	0.22μm, PTFE, φ50mm	是	1	6
CSB014002	2L方瓶密闭系统	两通	60cm, 1/8" ID, 1/4" OD	热封	0.22μm, PTFE, φ50mm	是	1	6
CSB020002	2L方瓶无菌转移盖	两通	60cm, 1/4" ID, 3/8" OD	FLL	0.22μm, PTFE, φ50mm	是	1	6
CSB021002	2L方瓶无菌转移盖	两通	60cm, 1/4" ID, 3/8" OD	热封	0.22μm, PTFE, φ50mm	是	1	6
CSB022002	2L方瓶无菌转移盖	两通	60cm, 1/4" ID, 3/8" OD	Male MPC	0.22μm, PTFE, φ50mm	是	1	6
CSB013002	2L方瓶密闭系统	两通	60cm, 1/4" ID, 7/16" OD	热封	0.22μm, PTFE, φ50mm	是	1	6
CSB011005	5L方瓶密闭系统	两通	60cm, 1/4" ID, 3/8" OD	热封	0.22μm, PTFE, φ50mm	是	1	4
CSB012005	5L方瓶密闭系统	两通	60cm, 1/4" ID, 3/8" OD	Male MPC	0.22μm, PTFE, φ50mm	是	1	4
CSB013005	5L方瓶密闭系统	两通	60cm, 1/4" ID, 7/16" OD	热封	0.22μm, PTFE, φ50mm	是	1	4
CSB014005	5L方瓶密闭系统	两通	60cm, 1/8" ID, 1/4" OD	热封	0.22μm, PTFE, φ50mm	是	1	4
CSB021005	5L方瓶无菌转移盖	两通	60cm, 1/4" ID, 3/8" OD	热封	0.22μm, PTFE, φ50mm	是	1	6
CSB023005	5L方瓶无菌转移盖	两通	60cm, 1/4" ID, 7/16" OD	热封	0.22μm, PTFE, φ50mm	是	1	6



目录号	产品名称	管路规格			过滤器	灭菌	个/袋	个/箱
		管路类型	管路尺寸	管路接口				
CSB011005	5L方瓶密闭系统	两通	60cm, 1/4" ID, 3/8" OD	热封	0.22μm, PTFE, φ50mm	是	1	4
CSB012005	5L方瓶密闭系统	两通	60cm, 1/4" ID, 3/8" OD	Male MPC	0.22μm, PTFE, φ50mm	是	1	4
CSB013005	5L方瓶密闭系统	两通	60cm, 1/4" ID, 7/16" OD	热封	0.22μm, PTFE, φ50mm	是	1	4
CSB014005	5L方瓶密闭系统	两通	60cm, 1/8" ID, 1/4" OD	热封	0.22μm, PTFE, φ50mm	是	1	4
CSB021005	5L方瓶无菌转移盖	两通	60cm, 1/4" ID, 3/8" OD	热封	0.22μm, PTFE, φ50mm	是	1	6
CSB023005	5L方瓶无菌转移盖	两通	60cm, 1/4" ID, 7/16" OD	热封	0.22μm, PTFE, φ50mm	是	1	6



微信公众号



微信视频号



小红书号

广州洁特生物过滤股份有限公司  
Guangzhou Jet Bio-Filtration Co., Ltd.  
地址: 广州市黄埔区永和经济技术开发区斗塘路1号

电话: 400-8717-688  
官网: www.jetbiofil.com  
邮箱: customer@jetbiofil.com