

目录号	产品名称	管路规格			滤器	灭菌	个/袋	个/箱
		管路类型	管路尺寸	管路接口				
TAB300500	500mL培养摇瓶密闭系统	两通	60cm, 1/8" ID, 1/4" OD	MLL	0.22μm, PTFE, φ50mm	是	1	4
TAB300000	1000mL培养摇瓶密闭系统	两通	60cm, 1/8" ID, 1/4" OD	MLL	0.22μm, PTFE, φ50mm	是	1	4
TAB301000	1000mL培养摇瓶密闭系统	两通	60cm, 1/4" ID, 7/16" OD	Male MPC	0.22μm, PTFE, φ50mm	是	1	4
TAB302000	1000mL培养摇瓶密闭系统	两通	60cm, 1/4" ID, 7/16" OD	热封	0.22μm, PTFE, φ50mm	是	1	4
TAB300002	2L培养摇瓶无菌转移盖	两通	120cm, 1/4" ID, 3/8" OD	Male MPC	0.22μm, PTFE, φ50mm	是	1	6
TAB310002	2L培养摇瓶无菌转移盖	两通	120cm, 1/8" ID, 1/4" OD	MLL	0.22μm, PTFE, φ50mm	是	1	6
TAB331002	2L培养摇瓶无菌转移盖	两通	50cm, 1/4" ID, 7/16" OD	热封	0.22μm, PTFE, φ50mm	是	1	6
TAB300003	3L培养摇瓶无菌转移盖	两通	120cm, 1/4" ID, 3/8" OD	Male MPC	0.22μm, PTFE, φ50mm	是	1	6
TAB310003	3L培养摇瓶无菌转移盖	两通	120cm, 1/8" ID, 1/4" OD	MLL	0.22μm, PTFE, φ50mm	是	1	6
TAB331003	3L培养摇瓶无菌转移盖	两通	50cm, 1/4" ID, 7/16" OD	热封	0.22μm, PTFE, φ50mm	是	1	6
TAB311003	3L培养摇瓶无菌转移盖	两通	50cm, 1/8" ID, 1/4" OD	热封	0.22μm, PTFE, φ50mm	是	1	6
TAB321003	3L培养摇瓶无菌转移盖	两通	120cm, 1/4" ID, 3/8" OD	热封	0.22μm, PTFE, φ50mm	是	1	6
TAB322003	3L培养摇瓶无菌转移盖	两通	120cm, 1/8" ID, 1/4" OD	热封	0.22μm, PTFE, φ50mm	是	1	6
TAB300005	5L培养摇瓶无菌转移盖	两通	100cm, 1/4" ID, 3/8" OD	Male MPC 带无菌取样口	0.22μm, PTFE, φ50mm	是	1	6
TAB320005	5L培养摇瓶无菌转移盖	两通	100cm, 1/4" ID, 3/8" OD	Male MPC	0.22μm, PTFE, φ50mm	是	1	6
TAB331005	5L培养摇瓶无菌转移盖	两通	50cm, 1/4" ID, 7/16" OD	热封	0.22μm, PTFE, φ50mm	是	1	6
TAB311005	5L培养摇瓶无菌转移盖	两通	50cm, 1/8" ID, 1/4" OD	热封	0.22μm, PTFE, φ50mm	是	1	6

方瓶密闭系统

目录号	产品名称	管路规格			滤器	灭菌	个/袋	个/箱
		管路类型	管路尺寸	管路接口				
CSB010250	250mL方瓶密闭系统	两通	60cm, 1/4" ID, 3/8" OD	FLL	0.22μm, PTFE, φ30mm	是	1	10
CSB011250	250mL方瓶密闭系统	两通	60cm, 1/4" ID, 3/8" OD	热封	0.22μm, PTFE, φ30mm	是	1	10
CSB012250	250mL方瓶密闭系统	两通	60cm, 1/4" ID, 3/8" OD	Male MPC	0.22μm, PTFE, φ30mm	是	1	10
CSB211250	250mL方瓶密闭系统	两通	60cm, 1/8" ID, 1/4" OD	热封	0.22μm, PTFE, φ30mm	是	1	10
CSB311250	250mL方瓶密闭系统	两通	60cm, 1/4" ID, 7/16" OD	热封	0.22μm, PTFE, φ30mm	是	1	10
CSB020250	250mL方瓶无菌转移盖	两通	60cm, 1/4" ID, 3/8" OD	FLL	0.22μm, PTFE, φ30mm	是	1	10
CSB021250	250mL方瓶无菌转移盖	两通	60cm, 1/4" ID, 3/8" OD	热封	0.22μm, PTFE, φ30mm	是	1	10
CSB022250	250mL方瓶无菌转移盖	两通	60cm, 1/4" ID, 3/8" OD	Male MPC	0.22μm, PTFE, φ30mm	是	1	10
CSB110250	250mL方瓶密闭系统	三通	60cm, 1/4" ID, 3/8" OD	FLL	0.22μm, PTFE, φ30mm	是	1	10
CSB111250	250mL方瓶密闭系统	三通	60cm, 1/4" ID, 3/8" OD	热封	0.22μm, PTFE, φ30mm	是	1	10
CSB120250	250mL方瓶无菌转移盖	三通	60cm, 1/4" ID, 3/8" OD	FLL	0.22μm, PTFE, φ30mm	是	1	10
CSB121250	250mL方瓶无菌转移盖	三通	60cm, 1/4" ID, 3/8" OD	热封	0.22μm, PTFE, φ30mm	是	1	10
CSB010500	500mL方瓶密闭系统	两通	60cm, 1/4" ID, 3/8" OD	FLL	0.22μm, PTFE, φ30mm	是	1	10
CSB011500	500mL方瓶密闭系统	两通	60cm, 1/4" ID, 3/8" OD	热封	0.22μm, PTFE, φ30mm	是	1	10
CSB012500	500mL方瓶密闭系统	两通	60cm, 1/4" ID, 3/8" OD	Male MPC	0.22μm, PTFE, φ30mm	是	1	10
CSB211500	500mL方瓶密闭系统	两通	60cm, 1/8" ID, 1/4" OD	热封	0.22μm, PTFE, φ30mm	是	1	10
CSB013500	500mL方瓶无菌转移盖	两通	60cm, 1/4" ID, 7/16" OD	热封	0.22μm, PTFE, φ30mm	是	1	10
CSB020500	500mL方瓶无菌转移盖	两通	60cm, 1/4" ID, 3/8" OD	FLL	0.22μm, PTFE, φ30mm	是	1	10
CSB021500	500mL方瓶无菌转移盖	两通	60cm, 1/4" ID, 3/8" OD	热封	0.22μm, PTFE, φ30mm	是	1	10
CSB022500	500mL方瓶无菌转移盖	两通	60cm, 1/4" ID, 3/8" OD	Male MPC	0.22μm, PTFE, φ30mm	是	1	10

目录号	产品名称	管路规格			滤器	灭菌	个/袋	个/箱
		管路类型	管路尺寸	管路接口				
CSB110500	500mL方瓶密闭系统	三通	60cm, 1/4" ID, 3/8" OD	FLL	0.22μm, PTFE, φ30mm	是	1	10
CSB111500	500mL方瓶密闭系统	三通	60cm, 1/4" ID, 3/8" OD	热封	0.22μm, PTFE, φ30mm	是	1	10
CSB120500	500mL方瓶无菌转移盖	三通	60cm, 1/4" ID, 3/8" OD	FLL	0.22μm, PTFE, φ30mm	是	1	10
CSB121500	500mL方瓶无菌转移盖	三通	60cm, 1/4" ID, 3/8" OD	热封	0.22μm, PTFE, φ30mm	是	1	10
CSB010001	1000mL方瓶密闭系统	两通	60cm, 1/4" ID, 3/8" OD	FLL	0.22μm, PTFE, φ30mm	是	1	10
CSB011001	1000mL方瓶密闭系统	两通	60cm, 1/4" ID, 3/8" OD	热封	0.22μm, PTFE, φ30mm	是	1	10
CSB012001	1000mL方瓶密闭系统	两通	60cm, 1/4" ID, 3/8" OD	Male MPC	0.22μm, PTFE, φ30mm	是	1	10
CSB211001	1000mL方瓶密闭系统	两通	60cm, 1/8" ID, 1/4" OD	热封	0.22μm, PTFE, φ30mm	是	1	10
CSB311001	1000mL方瓶密闭系统	两通	60cm, 1/8" ID, 1/4" OD	FLL	0.22μm, PTFE, φ30mm	是	1	10
CSB511001	1000mL方瓶密闭系统	两通	60cm, 1/4" ID, 7/16" OD	热封	0.22μm, PTFE, φ30mm	是	1	10
CSB020001	1000mL方瓶无菌转移盖	两通	60cm, 1/4" ID, 3/8" OD	FLL	0.22μm, PTFE, φ30mm	是	1	10
CSB021001	1000mL方瓶无菌转移盖	两通	60cm, 1/4" ID, 3/8" OD	热封	0.22μm, PTFE, φ30mm	是	1	10
CSB022001	1000mL方瓶无菌转移盖	两通	60cm, 1/4" ID, 3/8" OD	Male MPC	0.22μm, PTFE, φ30mm	是	1	10
CSB110001	1000mL方瓶密闭系统	三通	60cm, 1/4" ID, 3/8" OD	FLL	0.22μm, PTFE, φ30mm	是	1	10
CSB111001	1000mL方瓶密闭系统	三通	60cm, 1/4" ID, 3/8" OD	热封	0.22μm, PTFE, φ30mm	是	1	10
CSB120001	1000mL方瓶无菌转移盖	三通	60cm, 1/4" ID, 3/8" OD	FLL	0.22μm, PTFE, φ30mm	是	1	10
CSB121001	1000mL方瓶无菌转移盖	三通	60cm, 1/4" ID, 3/8" OD	热封	0.22μm, PTFE, φ30mm	是	1	10
CSB010002	2L方瓶密闭系统	两通	60cm, 1/4" ID, 3/8" OD	FLL	0.22μm, PTFE, φ50mm	是	1	6
CSB011002	2L方瓶密闭系统	两通	60cm, 1/4" ID, 3/8" OD	热封	0.22μm, PTFE, φ50mm	是	1	6
CSB012002	2L方瓶密闭系统	两通	60cm, 1/4" ID, 3/8" OD	Male MPC	0.22μm, PTFE, φ50mm	是	1	6
CSB014002	2L方瓶密闭系统	两通	60cm, 1/8" ID, 1/4" OD	热封	0.22μm, PTFE, φ50mm	是	1	6
CSB020002	2L方瓶无菌转移盖	两通	60cm, 1/4" ID, 3/8" OD	FLL	0.22μm, PTFE, φ50mm	是	1	6
CSB021002	2L方瓶无菌转移盖	两通	60cm, 1/4" ID, 3/8" OD	热封	0.22μm, PTFE, φ50mm	是	1	6
CSB022002	2L方瓶无菌转移盖	两通	60cm, 1/4" ID, 3/8" OD	Male MPC	0.22μm, PTFE, φ50mm	是	1	6
CSB013002	2L方瓶密闭系统	两通	60cm, 1/4" ID, 7/16" OD	热封	0.22μm, PTFE, φ50mm	是	1	6
CSB011005	5L方瓶密闭系统	两通	60cm, 1/4" ID, 3/8" OD	热封	0.22μm, PTFE, φ50mm	是	1	4
CSB012005	5L方瓶密闭系统	两通	60cm, 1/4" ID, 3/8" OD	Male MPC	0.22μm, PTFE, φ50mm	是	1	4
CSB013005	5L方瓶密闭系统	两通	60cm, 1/4" ID, 7/16" OD	热封	0.22μm, PTFE, φ50mm	是	1	4
CSB014005	5L方瓶密闭系统	两通	60cm, 1/8" ID, 1/4" OD	热封	0.22μm, PTFE, φ50mm	是	1	4
CSB021005	5L方瓶无菌转移盖	两通	60cm, 1/4" ID, 3/8" OD	热封	0.22μm, PTFE, φ50mm	是	1	6
CSB023005	5L方瓶无菌转移盖	两通	60cm, 1/4" ID, 7/16" OD	热封	0.22μm, PTFE, φ50mm	是	1	6

Note:对于表中的培养基方瓶封闭系统, 5000mL款的内管材质标配为硅胶, 其余规格均为聚四氟乙烯(PTFE)。

离心瓶/管密闭系统

目录号	产品名称	管路规格			滤器	灭菌	包装方式		
		管路类型	管路尺寸	管路接口			替换盖	个/袋	个/箱
CST010050	50mL离心管(可立底)密闭系统	两通	50cm, 1/8" ID, 1/4" OD	MLL	0.22μm, PTFE, φ30mm	是	每袋赠送1个密封替换盖	1	4
CST010250	250mL离心瓶密闭系统	两通	50cm, 1/8" ID, 1/4" OD	MLL	0.22μm, PTFE, φ30mm	是		1	4
CST010500	500mL离心瓶密闭系统	两通	50cm, 1/8" ID, 1/4" OD	MLL	0.22μm, PTFE, φ30mm	是		1	4

MLL:公鲁尔接头带堵头; FLL:母鲁尔接头带堵头; Male MPC:公MPC接头带堵头



方瓶密闭系统

摇瓶密闭系统

离心瓶/管密闭系统

广州洁特生物过滤股份有限公司
Guangzhou Jet Bio-Filtration Co., Ltd.

液体密闭转移系统 Closed System Solutions

在实验室研究和生物制药工艺大规模生产过程中,常常需要对各种培养容器里的液体进行转移,如补液、取样、接种等。传统液体转移方法有倾倒、使用移液管等,这类开放式移液对实验人员来说存在污染风险高、操作时间长、操作复杂等弊端,为防止污染,全程密闭的液体转移系统成为当下生物制药企业的首选。

洁特生物提供摇瓶密闭系统、培养基方瓶密闭系统和离心瓶/管密闭系统等多种液体密闭转移系统,瓶体采用符合USP Class VI标准的原料制成,优选进口管路配件,在10万级洁净车间生产,成品具有极低的可提取物水平与高生物安全性可广泛用于细胞治疗、基因治疗、抗体和疫苗等生物药研发生产过程中的液体转移、取样及培养,最大程度降低污染风险,满足您对液体无菌、安全转移的需求。

产品优势

瓶盖
采用注塑一体式连接,可最大限度降低液体泄露、残留的风险

外管
可无菌热焊接的医用级TPE软管,表面光滑、耐摩擦、高弹性

内管
可伸至瓶底,液体转移无残留

0.22µm PTFE滤器
可平衡瓶内瓶外压差,同时保证瓶内无菌环境

接头
多种通用的标准接头可选,可适配各种工艺产线

质量保障

极低的可提取物水平

☑ USP<665>、USP<1665>、BPOG可提取物研究

良好的生物安全性

☑ USP<87>细胞毒性

☑ USP<88>皮内刺激试验

☑ USP<88>急性全身毒性

☑ USP<88>皮下植入实验

☑ ISO10993致敏试验

☑ ASTM F756溶血试验

☑ USP<85>内毒素

☑ USP<151>无热原

☑ USP<788>不溶性微粒

☑ USP<661.2>理化测试

辐照灭菌, SAL 10⁻⁶, 无DNase/RNase


降低污染风险

减少操作时间

降低操作难度

产品结构

摇瓶密闭系统

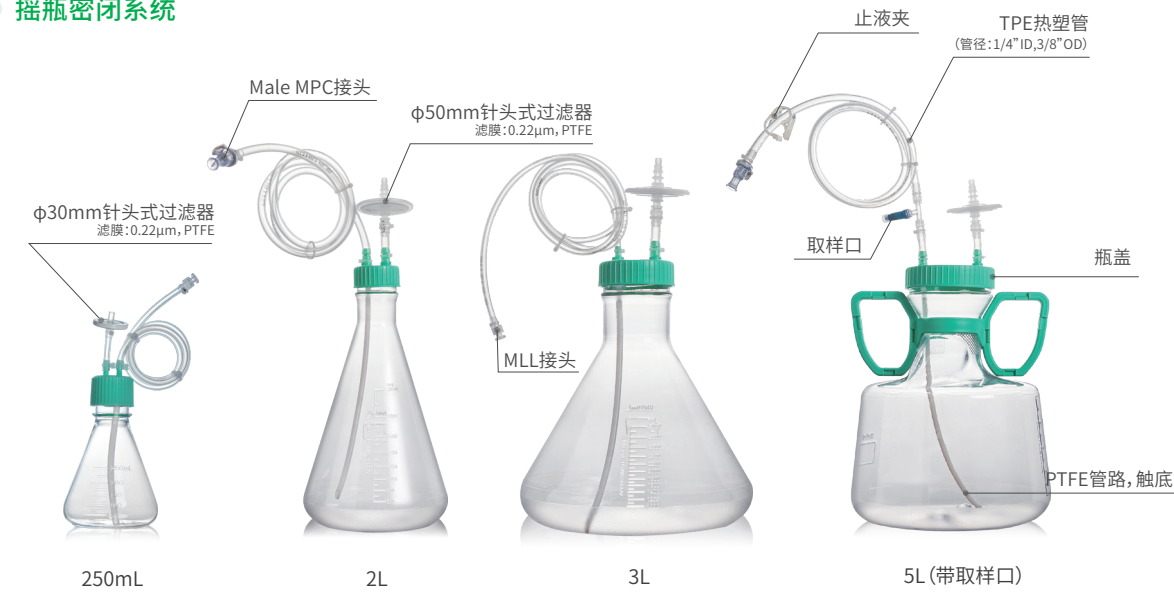


匹配摇瓶规格: 125mL 250mL 500mL 1000mL 2L 3L 5L

管路接头类型: Male MPC接头 MLL接头 热封

材质: 瓶盖高密度聚乙烯(HDPE), 内管聚四氟乙烯(PTFE), 外管热塑性弹性体(TPE), MLL接头聚丙烯(PP)/Male MPC接头聚碳酸酯(PC), 过滤器外壳聚丙烯(PP), 过滤器滤膜聚四氟乙烯(PTFE), 均符合USP Class VI标准

培养基方瓶密闭系统

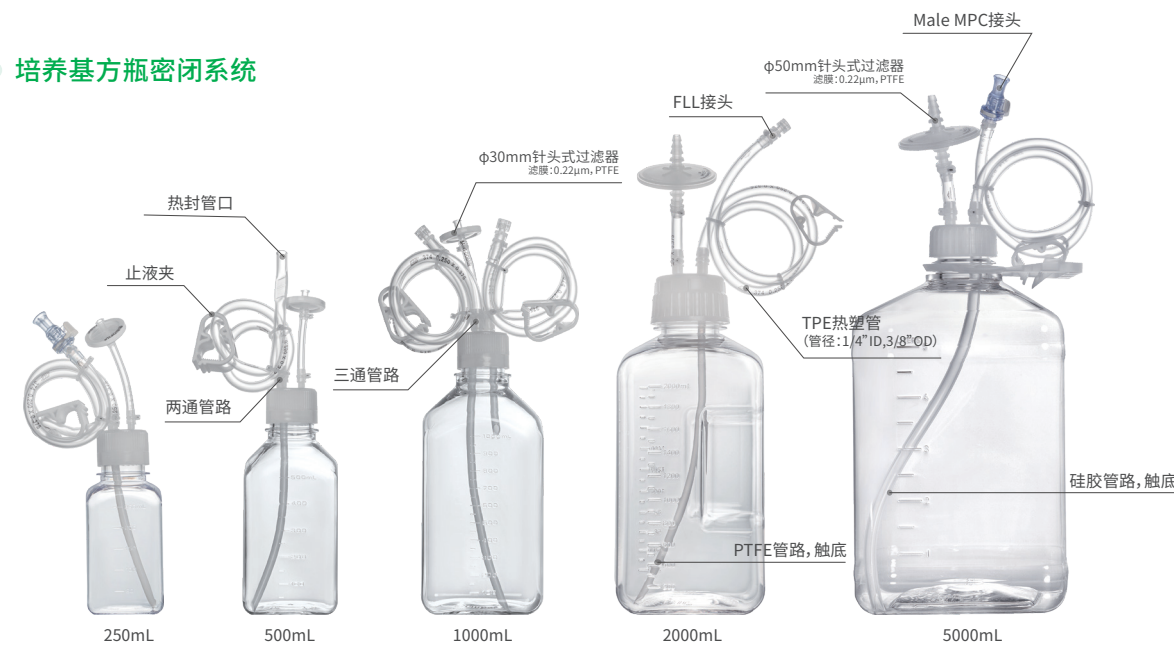


匹配方瓶规格: 250mL 500mL 1000mL 2000mL 5000mL

管路接头类型: Male MPC接头 FLL接头 热封管口

管路类型: 两通 三通

材质: 瓶身环己二醇(共聚聚酯)(PETG), 瓶盖高密度聚乙烯(HDPE), 内管聚四氟乙烯(PTFE)/硅胶, 外管热塑性弹性体(TPE), FLL接头聚丙烯(PP)/Male MPC接头聚碳酸酯(PC), 过滤器外壳聚丙烯(PP), 过滤器滤膜聚四氟乙烯(PTFE), 均符合USP Class VI标准

离心瓶/管密闭系统

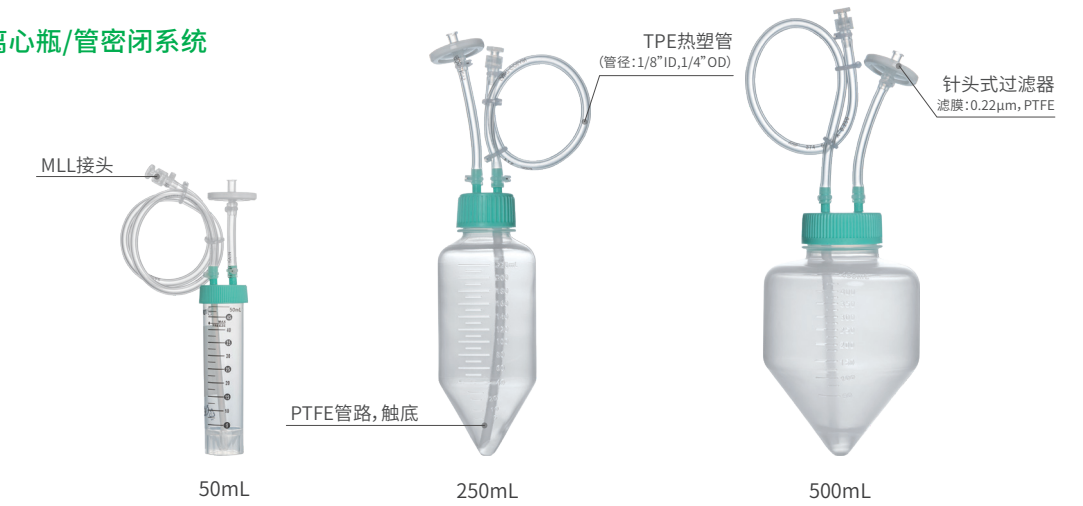

匹配离心瓶/管规格: 50mL 250mL 500mL

管路接头类型: MLL接头

管路类型: 两通


材质: 瓶身聚丙烯(PP), 瓶盖高密度聚乙烯(HDPE), 内管聚四氟乙烯(PTFE),

外管热塑性弹性体(TPE), MLL接头聚丙烯(PP), 过滤器外壳聚丙烯(PP),

过滤器滤膜聚四氟乙烯(PTFE), 均符合USP Class VI标准

定制服务

洁特生物密闭系统,可根据您的需求提供专属定制服务,包括匹配不同的产品、管路、瓶盖、接头等,以满足您不同的实验或生产工艺需求。

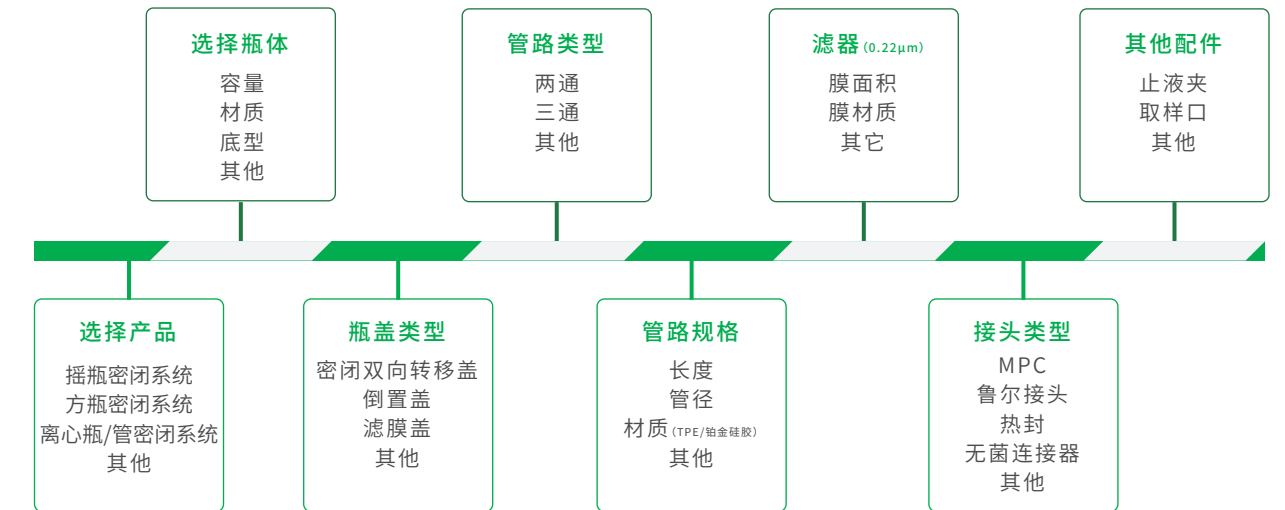

订购信息

摇瓶密闭系统

目录号	产品名称	管路规格			滤器	灭菌	个/袋	个/箱
		管路类型	管路尺寸	管路接口				
TAB300125	125mL培养摇瓶密闭系统	两通	60cm, 1/8" ID, 1/4" OD	MLL	0.22µm, PTFE, φ30mm	是	1	4
TAB300250	250mL培养摇瓶密闭系统	两通	60cm, 1/8" ID, 1/4" OD	MLL	0.22µm, PTFE, φ30mm	是	1	4