

100mL圆底离心管

圆底离心管是实验室常用的一种样本处理容器,常用于细胞生物学、免疫学、微生物学等各种实验室离心操作,同时也可用于样品的制备以及样品储存等。

洁特生物100mL圆底离心管,采用符合USP Class VI标准的聚丙烯(PP)材料制成,成分明确,无动物源,化学稳定性好,管壁光滑,厚度均匀,抗冲击性强,圆弧形管底设计,底部受力面积大,应力分散均匀,最大RCF可达6000×g,经严格的密封性测试,无泄漏、无变形,适合大体积样本处理或密度梯度离心等操作。

- ◎ 规格:100mL
- ◎ 材质:管体聚丙烯(PP),管盖高密度聚乙烯(HDPE),均符合USP Class VI标准



产品特性


- ◇ 管体采用优质的聚丙烯(PP)材料制成,成分明确,无动物源,化学稳定性好,抗冲击性强
- ◇ 圆弧形管底设计^①,底部受力面积大,管壁过渡平滑,应力分散均匀
- ◇ 离心时最大加液量为80mL,可耐受离心力6000×g
- ◇ 经-60kPa条件下严格的密封性测试,无泄漏、无变形
- ◇ 模刻刻度清晰、准确,便于观察
- ◇ 管体上部360°大面积磨砂书写区域设计^②,便于标识、记录
- ◇ 耐温范围:-80°C~121°C
- ◇ 非灭菌与辐照灭菌可选,辐照灭菌,SAL 10⁻⁶;无DNase/RNase,无热原

本产品适用于市面上常见的大容量离心机品牌,例如:Thermo Fisher Scientific™、BECKMAN、湘仪、卢湘仪等。

温馨提示:在进行离心操作时,请根据本产品 and 离心机转子的规格尺寸,选用合适的适配器一起使用。



产品尺寸(mm)

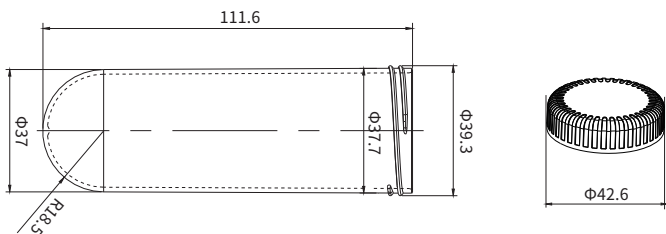

订购信息

目录号	容量(mL)	底类型	盖类型	灭菌	最大离心力(×g)	包装	支/袋	支/箱
CFT011100	100.0	圆底	平盖	是	6000	袋装	25	300
CFT010100	100.0	圆底	平盖	否	6000	袋装	25	300

保质期:产品在未开封状态下,储存于阴凉干燥处(15-30°C),有效期3年



微信公众号



微信视频号



小红书号

广州洁特生物过滤股份有限公司
Guangzhou Jet Bio-Filtration Co., Ltd.
地址:广州市黄埔区永和经济技术开发区斗塘路1号

电话:400-8717-688
官网:www.jetbiofil.com
邮箱:customer@jetbiofil.com